

IsoAmpliar Plot Analysis 최초 사용자용 상세 가이드

LAMP amplification fluorescence analysis guide

- 앱: <https://siun-comp.github.io/isoampliar-plot-analysis/>
- 개발자: Jang Si Un
- 가이드 기준일: 2026-07-12
- 예시 데이터: **Synthetic Sample, Control Sample, Assay 1, Assay 2, Reference**와 합성 fluorescence 값만 사용
- 권장 환경: Windows 데스크톱 Chrome 또는 Edge의 최신 버전

이 도구는 LAMP 증폭형광 데이터를 브라우저에서 선택, 비교, 시각화하고 결과를 내보내기 위한 분석 보조 도구다. 임상 판독, 양성/음성 판단, threshold 자동 산정, Ct/Cq 계산 도구가 아니다.

1. 빠른 시작

1. 원본 데이터 열기로 Excel 파일을 가져오거나 빠른 붙여넣기를 연다.
2. 데이터 형식과 warning을 확인한다.
3. 시약별 또는 검체별 보기에서 비교할 curve만 선택한다.
4. 반복 비교 조합은 선택 세트로 저장하고 Scale, Style, Legend, Analysis Labels를 조정한다.
5. PNG/JPEG, Clipboard PNG, Legend 출력, 선택 데이터 XLSX 중 목적에 맞는 결과를 만든다.
6. 나중에 분석을 이어갈 경우 Analysis XLSX를 저장한다.

2. Excel 입력 형식

앱은 file picker로 선택한 .xls와 .xlsx의 첫 번째 worksheet만 사용한다. Drag and drop과 worksheet 선택은 제공하지 않으며, 각 열은 하나의 curve다.

위치	의미	합성 예시
1행	검체 또는 조건 이름	Synthetic Sample
2행	시약 또는 채널 이름	Assay 1
3행 이후	Cycle 순서의 fluorescence 숫자	0.12, 0.18, 0.42

- X축은 가장 긴 데이터 열을 기준으로 **Cycle 1..N**을 생성한다.
- 수식은 workbook에 cached numeric value가 있을 때만 읽으며 앱이 재계산하지 않는다.
- 검체명이나 시약명이 비어 있어도 fluorescence가 있으면 curve를 가져오고 warning을 표시한다.
- 내부 빈 값과 숫자가 아닌 값은 **null**로 처리해 선을 연결하지 않는다.
- 원본 숫자에 smoothing, normalization, baseline correction, log transform, averaging, Ct/Cq 계산을 적용하지 않는다.

3. 소량 표 붙여넣기

Quick Paste Import는 비교용 curve 몇 개를 추가하기 위해 새 Excel 파일을 만드는 부담을 줄이는 기능이다. spreadsheet 편집기가 아니며, 이미 가져온 데이터를 앱 안에서 수정하지 않는다.

검체명·시약명 포함 모드

Excel 입력과 같은 구조를 붙여넣는다.

```
Synthetic Sample<Tab>Synthetic Sample<Tab>Control Sample
Assay 1<Tab>Assay 2<Tab>Reference
0.12<Tab>0.10<Tab>0.08
0.18<Tab>0.15<Tab>0.09
```

한 검체의 시약별 값 모드

검체명을 별도 입력하고, 붙여넣은 표의 1행을 시약명, 2행 이후를 fluorescence로 해석한다.

검체명: Comparison Sample

```
Assay 1<Tab>Assay 2
0.12<Tab>0.10
0.18<Tab>0.15
```

검체명은 새 import source를 구성할 때만 사용한다. 이미 가져온 curve의 검체명을 바꾸는 기능이 아니다.

지원 구분 형식과 제한

- Excel 범위 복사에서 생성되는 Tab 구분 표를 지원한다.
- curve 하나만 복사한 구분자 없는 단일 열을 지원한다.
- comma/CSV 표는 자동 해석하지 않는다. 실험표가 라벨, 천 단위, 소수점과 충돌해 데이터가 잘못 분리될 수 있기 때문이다.
- custom Cycle 열, quoted CSV, multiline cell, CSV file import는 지원하지 않는다.
- raw text 2,000,000자 또는 250,000 cells를 넘으면 브라우저 안전을 위해 차단한다.
- 10,000 fluorescence cells를 넘으면 대량 입력 안내를 표시하지만 안전 상한 이하면 가져오기를 막지 않는다.

미리보기와 warning

미리보기 생성 전에는 분석 데이터가 바뀌지 않는다. 미리보기는 읽기 전용이며 다음 정보를 보여준다.


- 구분 방식, curve 수, Cycle 수, warning 수
- 검체명과 시약명
- 처음 12개 curve와 처음 10개 Cycle
- warning 위치와 처리 결과
- 반영 대상 analysis tab

빈 fluorescence 또는 숫자가 아닌 값이 null로 바뀌는 경우, 해당 위치와 그래프 gap 결과를 확인하는 checkbox를 선택해야 가져오기 버튼이 활성화된다.

미리보기 후 붙여넣기 원문, 입력 모드, 단일 검체명을 바꾸면 기존 미리보기는 현재 입력과 맞지 않는 상태가 된다. 원래 값으로 되돌려도 다시 미리보기를 생성해야 한다. 가져오기 이름만 바꾸는 것은 fluorescence를 다시 해석하지 않으며 내부 curve 식별값도 바뀌지 않는다.

반영 방식

- **현재 분석에 추가:** 기존 selection, scale, style, label, legend/export order를 유지하고 새 curve를 unselected로 끝에 추가한다.
- **새 분석으로 열기:** 독립 analysis tab을 만들고 새 curve는 모두 unselected, 대분류는 접힌 상태로 시작한다.
- 미리보기를 만든 분석이 닫히거나 변경되면 오래된 미리보기의 반영을 차단하고 다시 미리보기를 요구한다.

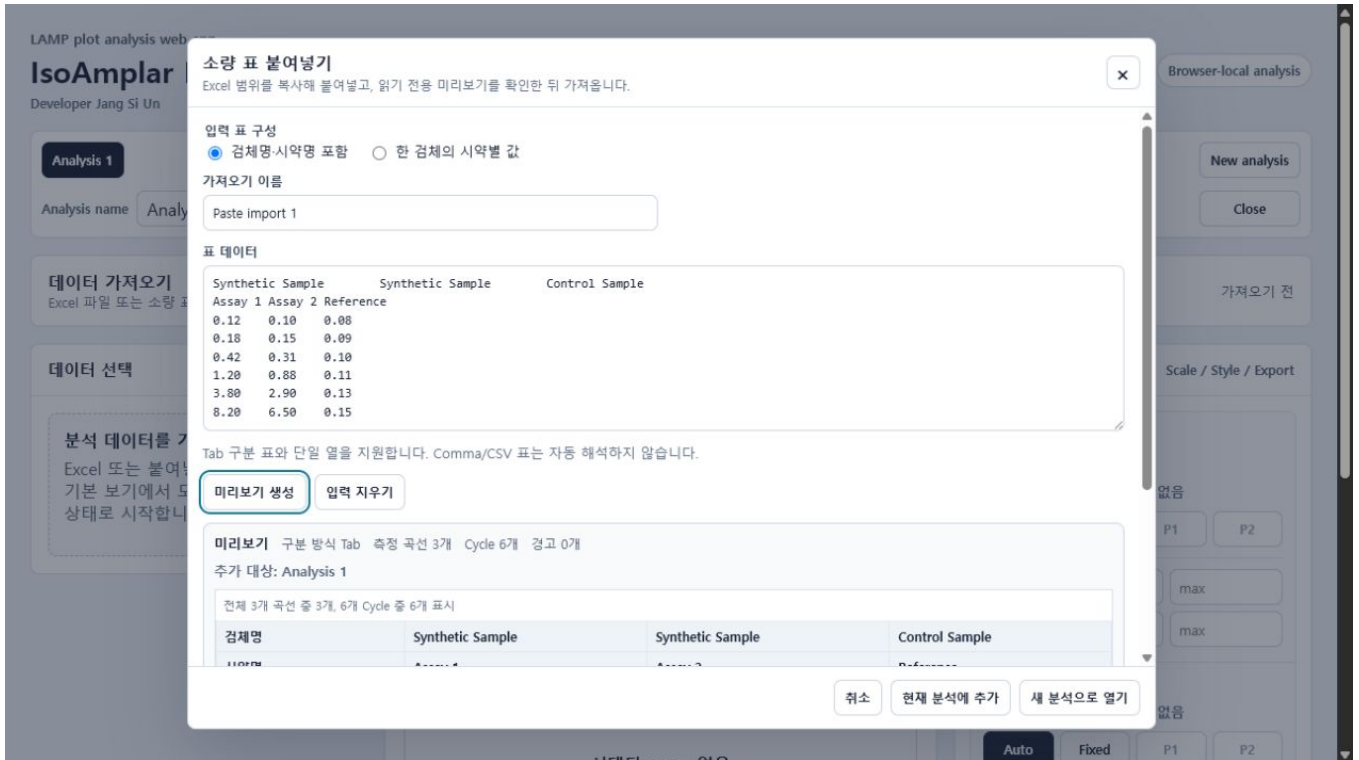

Quick Paste preview

4. 화면 구성

영역	역할
Analysis tabs	여러 분석을 독립적으로 열고 이름, 저장되지 않은 변경 상태를 관리
데이터 가져오기	원본 데이터 열기, Excel 추가, 빠른 붙여넣기, 저장한 분석 열기
데이터 선택	시약별/검체별 분류, 검색, 필터, curve 선택
그래프 미리보기	선택 curve, Box zoom, point readout, custom legend
설정	Scale, Style, Legend, Export

데이터 가져오기
Excel 파일 또는 소량 표 붙여넣기를 사용합니다. Excel은 첫 번째 worksheet만 사용합니다.

파일 선택 추가 선택 붙여넣기 입력 Paste import 1 - 3 curves - warnings 0

데이터 선택 시약별 검체별

시약별

검체

검체, 시약, curve label

전체 선택됨 미선택 경고

표시 3 선택 3

표시 선택 표시 해제 모두 접기

모두 펼치기

Assay 1 1/1

Assay 2 1/1

Reference 1/1

그래프 미리보기 Clean LAMP plot theme

Box zoom Previous scale Auto scale

Box zoom off.

Fluorescence

Synthetic chart after Quick Paste

설정 Scale / Style / Export

▼ Scale

X axis

Auto range: 1 - 6

Auto Fixed P1 P2

P1 min max

P2 min max

Y axis

Auto range: 0.08 - 8.2

Auto Fixed P1 P2

P1 min max

P2 min max

▶ Style

▶ Legend

화면 용어 빠른 해석

화면 용어	업무상 의미
Analysis / analysis tab	서로 영향을 주지 않는 하나의 분석 작업과 그 탭
Curve	Excel의 한 데이터 열에서 만들어진 검체·시약 조합의 형광 곡선
Unsaved / dirty	마지막 Analysis XLSX 저장 이후 변경된 내용이 있음
Dataset / source	현재 분석의 전체 데이터 / 데이터를 가져온 Excel 또는 붙여넣기 원문
curveld	곡선의 선택·순서·스타일을 안전하게 연결하는 내부 식별값. 사용자가 편집하지 않음
stale	입력 또는 대상 분석이 바뀌어 이전 미리보기·저장 결과를 그대로 반영할 수 없음
Raw / Display	Excel cell의 원래 값 / Excel 표시 형식을 반영한 검체·시약 이름
Warning code	warning 종류를 구분하는 내부 코드. 아래의 위치·처리 결과와 함께 확인
Snapshot / live analysis	저장을 시작한 시점의 상태 / 현재 화면에서 계속 편집 중인 분석

5. 데이터 선택과 검색

- 기본 보기는 시약별이다.
- 검색별 보기로 바뀌도 selection은 **curveId** 기준으로 유지된다.
- import 직후 모든 대분류 그룹은 접힌 상태다.
- 검색은 접힌 그룹을 포함한 전체 데이터에 적용된다.
- **표시 선택**과 **표시 해제**는 현재 검색/필터 조건 전체에 적용된다.
- 20개 초과 curve는 가득성 warning과 보조 action을 제공하지만 preview/export를 차단하지 않는다.

선택 세트로 반복 비교하기

선택 세트는 같은 분석에서 자주 번갈아 보는 curve 조합을 저장한다. 예를 들어 **조건 비교 1**에 curve 1, 4, 5를 저장하고 **조건 비교 2**에 curve 2, 3, 7을 저장할 수 있다.

1. 비교할 curve를 선택한다.
 2. **현재 선택을 새 세트로 저장**을 누르고 이름을 입력한다.
 3. 다른 조합도 같은 방법으로 저장한다.
 4. 드롭다운에서 세트를 고른 뒤 **적용**을 누르면 현재 선택이 그 조합으로 교체된다.
- 선택을 수동으로 바꾸면 적용된 세트명에 **수정됨**이 표시되며 저장된 세트는 자동으로 덮어쓰지 않는다.
 - **관리**에서 현재 선택으로 업데이트, 이름 변경, 삭제, 적용 전 선택으로 돌아가기를 사용할 수 있다.
 - 선택 세트는 curve 구성만 저장한다. Scale, Style, Analysis Labels, Legend Order는 바꾸지 않는다.
 - Excel 또는 Quick Paste 데이터를 추가해도 기존 세트에 새 curve가 자동으로 포함되지 않는다.
 - 선택 세트는 Analysis XLSX에 함께 저장되며 다른 analysis tab과 섞이지 않는다.

The image shows a user interface for managing selection sets. At the top, it says '선택 세트' (Selection Set) and '현재 적용: 조건 비교 1' (Currently Applied: Condition Comparison 1). Below this, there's a section labeled '적용 후보' (Application Candidates). It contains a dropdown menu showing '조건 비교 1 (1)' with a downward arrow, and a button labeled '적용' (Apply). At the bottom, there are two buttons: '새 세트' (New Set) and '관리' (Manage).

Selection Set controls

6. Scale과 Box zoom

모드	설명	권장 상황
Auto	현재 표시 curve에 맞춰 범위 계산	초기 탐색
Fixed	사용자가 min/max 직접 지정	비교 이미지의 축 동일
P1/P2	분석별 사용자 preset	반복 범위 전환
Box zoom	plot area를 사각형으로 선택해 Fixed 범위 적용	복잡한 구간 확대

Box zoom은 데이터 자체를 자르거나 변환하지 않는다. **Previous scale**은 Box zoom 전 scale로 한 단계씩 돌아가고, **Auto scale**은 양 축을 Auto로 바꾸며 return history를 지운다.

7. Style, Legend, Analysis Labels

- 색상, 선, 마커 기준을 검체별 또는 시약별로 지정할 수 있다.
- 기본 curve는 실선, 마커 없음이다.
- 선은 실선/점선/도트, 마커는 없음/원형/세모/네모를 지원한다.
- 개별 curve override는 그룹 기준보다 우선하며 **Custom** 또는 **Preset** 상태로 구분된다.
- Legend Order는 현재 사용자 순서이며 chart/export/CSV가 같은 순서를 따른다.
- Analysis Labels는 chart legend, report legend, Excel legend copy, plotted CSV header, Analysis XLSX에 적용된다.
- Reset은 원본 검체/시약 기반 라벨로 되돌리며 원본 source metadata는 바뀌지 않는다.

8. Export

출력	용도	주요 규칙
PNG/JPEG	그래프 이미지	흰 배경, YYMMDD_분석명_plotN.ext , 새 분석의 기본 레이아웃은 Plot only
Clipboard PNG	문서에 바로 붙여넣기	브라우저 clipboard 권한 필요, PNG/JPEG와 동일한 출력 프로필
Legend Clipboard PNG	여러 plot과 하나의 legend 조합	report-readable legend 사용
Copy for Excel	style sample과 label을 Excel의 별도 cell에 붙여넣기	Chrome/Edge rich clipboard 권장
선택 데이터 XLSX	현재 선택 curve의 수치와 출처-warning을 Excel에서 정리	공통 X축 직사각형 데이터일 때 활성화, 앱 복원 불가
Plotted CSV	현재 표시 curve의 공통 X축 데이터	기타 형식의 보조 출력
Analysis XLSX	전체 데이터와 설정 저장	선택하지 않은 curve도 포함

Plot이 포함된 PNG/JPEG/Clipboard PNG는 Excel에서 약 9.5cm 너비로 배치해도 축 숫자와 곡선을 읽기 쉽도록 별도 출력 프로필을 사용한다. 이미지 자체는 2400px 너비를 유지하므로 9.5cm로 축소해도 해상도를 버리지 않는다. 이 프로필은 글자·여백·선 두께와 주요 눈금 밀도만 조정하며 raw fluorescence, 선택 curve, X/Y Scale, 순서와 Style 값은 변경하지 않는다. 웹 미리보기의 크기와 모양도 바뀌지 않는다.

선택 데이터 XLSX에는 **PlottedData**, **CurveInfo**, **Warnings**, **ExportInfo**가 들어간다. 그래프의 Box zoom이나 표시 Scale과 관계없이 공통 X축 전체 행을 저장하며 fluorescence 숫자를 보정하거나 변환하지 않는다. 이 파일은 Excel 후속 정리가므로 **원본 데이터 열기**, **Excel 추가**, **저장한 분석 열기**에 다시 넣을 수 없다.

아래 화면은 출력 항목의 위치를 설명하기 위해 **Plot + Legend**를 선택한 예시다. 새 분석을 만들었을 때의 실제 기본값은 **Plot only**이며 필요할 때 사용자가 레이아웃을 바꿀 수 있다.

설정

Scale / Style / Export

▼ Scale

X axis

Selected raw data range: 1 - 12

Applied: Auto

Auto

Fixed

P1

P2

P1

min

max

P2

min

max

Y axis

Selected raw data range: 625.14 - 37117.4

Applied: Auto

Auto

Fixed

P1

P2

P1

min

max

P2

min

max

▶ Style

▶ Legend

▼ Export

다음 파일 번호: plot2

Chart image

Layout

Plot + Legend ▼

PNG 저장

JPEG 저장

클립보드 PNG

Legend outputs

Current legend order and analysis labels are used.

▶ Legend file save

Legend Clipboard
PNG

Copy for Excel

Data

선택 데이터 XLSX는 현재 선택 곡선의 Excel 정렬용이며 분석 목록 파일이 아닙니다.

선택 데이터 XLSX

▶ 기타 형식

Selected Data XLSX export

9. Analysis XLSX로 분석 이어가기

Analysis XLSX는 Excel 안에서 편집하는 chart workbook이 아니라 IsoAmpliar 웹 앱의 restore file이다.

저장 항목:

- 가져온 전체 데이터와 warning
- 선택/미선택, 그룹/검색 상태, 사용자 순서
- 선택 세트 이름, curve 구성, 마지막 적용 세트
- X/Y scale, P1/P2, style, individual override
- Analysis Labels, legend/export 설정
- analysis name과 export counter
- Excel/paste source type, immutable source ID, source name, column, paste input mode

Excel과 paste가 섞인 분석도 모든 source와 unselected curve를 포함한다. 구버전 Analysis XLSX에 source type이 없으면 Excel source로 안전하게 복원한다.

앱은 Analysis XLSX를 열 때 curve 길이, Cycle 순서, source 관계, 통계와 설정 참조가 서로 모순되지 않는지 검사하고, 손상되거나 맞지 않는 파일은 새 탭을 만들기 전에 거부한다. 릴리스 자동 테스트는 별도로 저장→복원→재저장을 수행해 모든 curve의 ID, source, X 배열, Y 배열, stats가 정확히 같은지 비교한다. 이 테스트에는 **null**, 음수, 지수값, 큰 fluorescence 값이 포함된다. 이는 릴리스 품질 검증이며, 사용자가 저장할 때마다 앱이 자동으로 독립 재저장 검사를 수행한다는 뜻은 아니다.

저장 중 현재 분석이 바뀌면 생성된 파일은 저장을 시작한 시점의 상태이고, 현재 편집 중인 분석은 Unsaved로 유지되며 자동으로 닫히지 않는다.

저장하지 않은 analysis tab이 하나라도 있으면 브라우저 새로고침 또는 창 닫기 시 브라우저 경고가 표시될 수 있다. 분석을 계속할 가능성이 있으면 먼저 상단 **분석 저장**으로 Analysis XLSX를 만든다.

10. Warning과 문제 해결

상황	앱 동작	권장 조치
검체명 비어 있음	curve를 가져오고 missing specimen warning	원본 또는 paste source 확인
시약명 비어 있음	curve를 가져오고 missing reagent warning	원본 또는 paste source 확인
두 header 모두 비어 있음	fluorescence가 있으면 두 warning과 함께 import	의도한 curve인지 확인
빈 fluorescence	null , graph gap	누락이 의도인지 확인
숫자가 아닌 fluorescence	원문 token warning, null , graph gap	메모/단위 혼입 확인
curve별 길이 차이	가장 긴 길이에 맞춰 짧은 curve를 null 로 채움	장비 export와 비교 목적 확인
comma/CSV paste	import 전 차단	Excel 범위를 Tab 형식으로 다시 복사
여러 worksheet	첫 번째 worksheet만 사용	분석 sheet를 첫 번째로 배치
formula cache 없음	앱이 계산하지 않고 warning	Excel에서 계산 후 저장
clipboard 실패	fallback message	HTTPS Chrome/Edge 또는 파일 저장 사용
입력 변경 후 오래된 붙여넣기 미리보기	가져오기 버튼 비활성화	현재 내용으로 미리보기 재생성
저장 도중 분석 변경	현재 분석을 Unsaved로 유지	현재 상태를 다시 저장
새로고침/창 닫기 경고	저장하지 않은 analysis가 있음	Analysis XLSX 저장 후 다시 시도
저장한 분석을 원본 열기로 선택	restore file 용도 불일치 안내	저장한 분석 열기 사용
원본 Excel을 저장한 분석 열기로 선택	source file 용도 불일치 안내	원본 데이터 열기 사용
선택 데이터 XLSX를 앱 입력으로 선택	Excel 후속 정리용 출력 파일 안내 후 거부	분석 재개는 Analysis XLSX, 원자료 재입력은 원본 Excel 사용

유효한 숫자 text는 finite decimal/scientific number로 변환해 같은 수치로 plot한다. 예를 들어 **1e3**은 숫자 **1000**으로 저장된다. 표시 문자열 모양 자체가 아니라 숫자 값의 보존이 보장된다. **NaN**, infinity, hexadecimal, 천 단위 쉼표, decimal comma는 숫자로 인정하지 않는다.

11. 권장 작업 흐름

1. 대량 데이터는 Excel 첫 worksheet에 정리한다.
2. 중간 비교용 소량 curve만 Quick Paste로 추가한다.
3. warning과 null 처리 결과를 확인한다.
4. 비교 목적에 필요한 curve를 선택하고 반복 조합은 선택 세트로 저장한다.
5. Scale을 통일하고 그룹 Style을 먼저 적용한다.
6. 필요한 curve만 개별 override하고 Analysis Labels를 정리한다.
7. 이미지/legend/선택 데이터 XLSX를 목적에 맞게 export한다.
8. 분석을 이어갈 가능성이 있으면 Analysis XLSX를 저장하고 다시 열어 선택 세트까지 유지되는지 확인한다.

12. 현재 제한사항

- CSV file import와 comma/CSV paste parsing은 제공하지 않는다.
- worksheet picker, custom Cycle 열, source cell 편집은 제공하지 않는다.
- 이미 import된 검체명, 시약명, fluorescence를 앱 안에서 수정하지 않는다.
- native editable Excel chart를 생성하지 않는다.
- 자동 threshold, Ct/Cq, 임상 판독 계산을 제공하지 않는다.
- clipboard는 브라우저/보안 정책에 따라 실패할 수 있다.
- 모바일 분석 화면은 지원 목표가 아니다. 데스크톱 브라우저를 사용한다.

13. 개인정보와 네트워크

- Excel과 Quick Paste 데이터는 앱의 브라우저 메모리에서 처리된다.
- 앱은 서버 저장, 계정, 데이터베이스, 실시간 공동 편집 기능을 사용하지 않는다.
- 릴리스 브라우저 테스트는 화면 구성 파일을 읽는 정상 요청 외에 앱 주소로 데이터를 보내는 요청, 외부 주소 통신, WebSocket 연결이 발생하면 실패로 처리한다.
- PNG/JPEG/CSV/선택 데이터 XLSX/Analysis XLSX/clipboard를 실행하면 사용자가 선택한 결과가 브라우저 밖의 파일 또는 clipboard로 이동한다. 민감한 label이 포함된 결과의 공유 범위는 사용자가 관리한다.

14. 최종 검수 체크리스트

- [] 실제 민감 label 대신 합성 또는 익명화 label을 사용했는가?
- [] warning과 null gap을 확인했는가?
- [] 선택 curve와 Legend Order가 의도한 비교 순서인가?
- [] 반복 비교 조합이 선택 세트에 정확히 저장되었는가?
- [] X/Y scale이 비교 목적에 맞는가?
- [] Style과 Analysis Labels가 export에 일관되게 반영되는가?
- [] PNG/JPEG 또는 clipboard 결과를 실제 문서에서 확인했는가?
- [] Analysis XLSX를 다시 열어 전체 source와 설정이 유지되는가?
- [] 선택 데이터 XLSX와 Analysis XLSX의 용도를 구분해 저장했는가?